


取扱を一時中止させて頂きます。

10cm ステンレス製ガスセル

Model G-2SS 10cm Stainless Steel Gas Cell

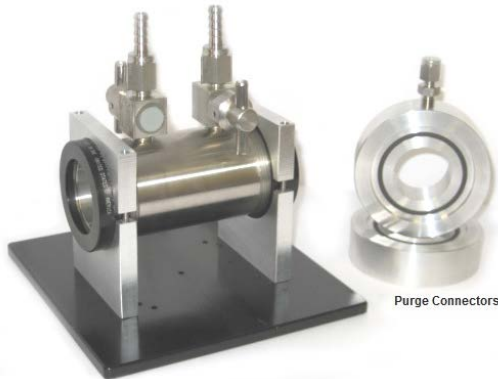

ベースプレートセルマウント

G-2SSステンレス製ガスセルは、一つのガス成分濃度が5%以上の比較的高濃度の混合ガスや純ガス定性試験に有益です。

また、使用する窓材の耐圧によりますが、被測定ガスを加圧して濃度を高めることも可能です。

(圧力計はオプション)

セルの開口径は39mmで、窓材は径47mm、厚さ6mmを使用します。

G-2SSステンレス製ガスセルは、使用する分光器に適合する一般的なスライドマウント(2×3インチ)または分光器専用ベースプレートにマウントします。

1/4NPTポートは圧力計、熱電対、および他のプローブの追加を可能にします。

窓のシールはニトリル製O-リングとPTFE製ガスケットの構成です。

使用する標準的な窓材はNaCl、KBrですが他の材質もオプションで提供可能です。

セルはオプションの加熱ジャケットにより加熱も可能です。



加熱ジャケット

P/N	品名
0008-5160	G-2SS, NaCl 窓
0008-5161	G-2SS, KBr 窓
0008-5162	2"×3"スライドマウント用セルホルダー
0008-9404	ベースプレートセルマウント (分光器型式指定)
0008-5584	圧力計
0008-5804	PTFEガスケット(4個セット)
0008-5321	ニトリル O-リング(4個セット)
0008-5805	PTFE O-リング(4個セット)
0008-XXXX	交換用窓材 47 x 6mm
0008-7329	加熱ジャケット(115V,250W、Max200℃)
0017-5548	温度コントローラー(115V)