


ジョイスティック 特徴

顕微鏡一体型システム「アクシスプロ」のアーム部分のみを独立させた、スタンドアロン型の電動マイクロマニピュレーターシステムです。ジョイスティック操作で、XYZ軸を高精度かつ滑らかに簡単に操作できます。



使い慣れた顕微鏡での微細作業が思いのままに

- お使いの顕微鏡の横に置いてすぐ使える電動システム
- ジョイスティックでXYZをミクロン単位で自在操作
- スティック操作で手の動きに追従したXYZ一括動作が可能
- 顕微鏡倍率に合わせて動作倍率がリニアに変更できる
- アクシスプロと同一の高精度ユニット採用

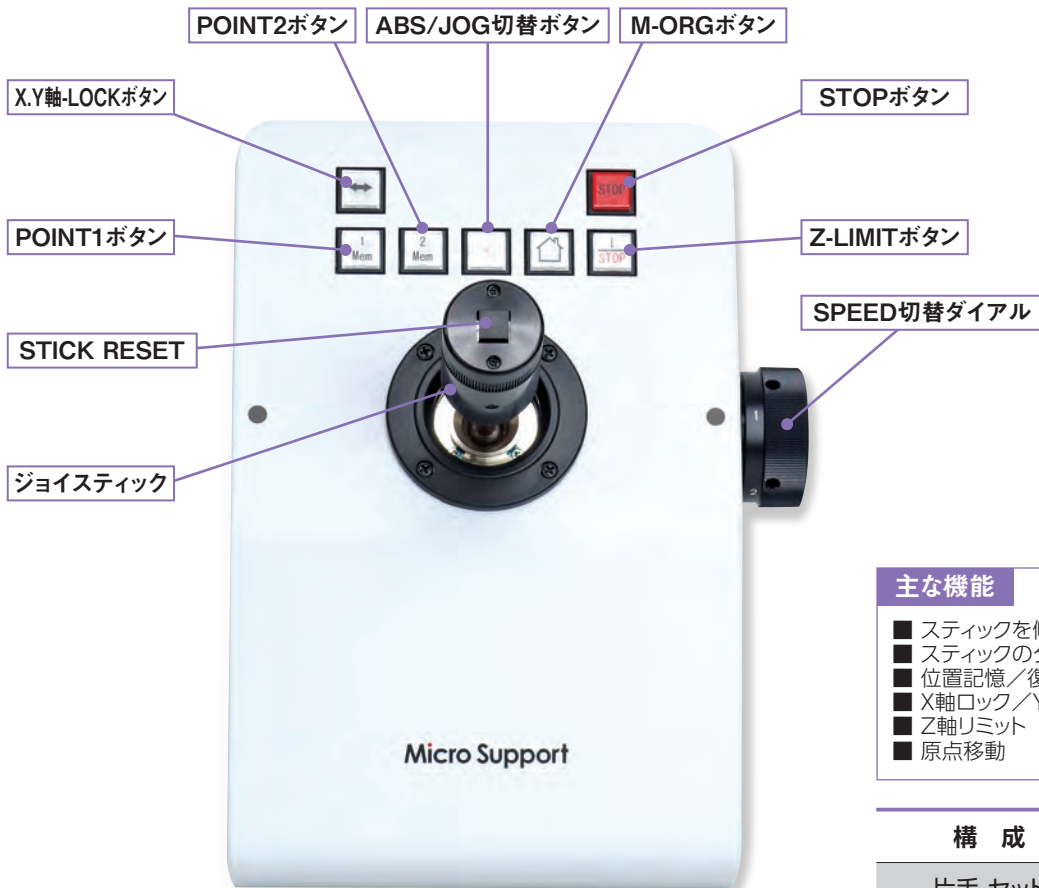

主な機能

- スティックを傾けることでXY軸移動
- スティックのダイヤル操作でZ軸移動
- 位置記憶/復帰機能 2箇所
- X軸ロック/Y軸ロック
- Z軸リミット
- 原点移動

構成	型番
片手 セット	QP-3JOY2