

New!

# プローブベンダー PB-1

タングステンプローブ用  
先端曲げ機

## タングステンプローブを設定角度に簡単曲げ加工



◆ サプリングする対象部位が奥まった部分にあり、通常のアーム角度でアクセス出来ない場合に、タングステンプローブを曲げる為の器具です。

◆ 弊社製タングステンプローブ (TPシリーズ) をセットしてカバーを閉じるだけで、安全確実に設定角度に曲げる事が出来ます。

◆ 曲げ角度は、ブロックを交換することで設定変更が可能です。

◆ アクシスプロと併用することで、いままで出来なかった部位からのサプリングも可能となります。

**標準価格： ¥98,000.- (税別)**

### 《主な仕様》

- ・ 使用可能タングステンプローブ：マイクロサポート製
- ・ タングステンプローブサイズ：長さ40mm×軸径0.6mm
- ・ 曲げ角度設定：約15°及び30° (シムによる微調整可能)
- ・ 曲げ位置：先端から約3mm/5mmを選択可能
- ・ 2本同時曲げ可能




プローブをセットする





押さえプレートを付ける



上蓋を閉めて軽く押さえる

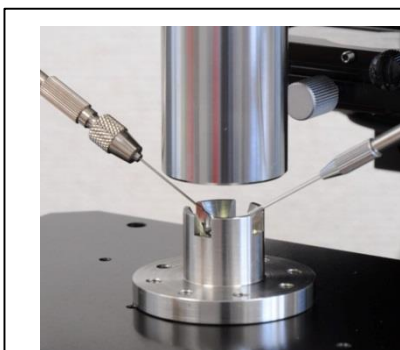

マニピュレーターに取り付けてサプリングするイメージ

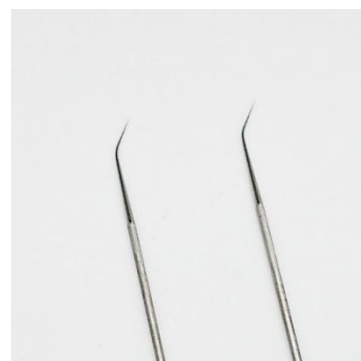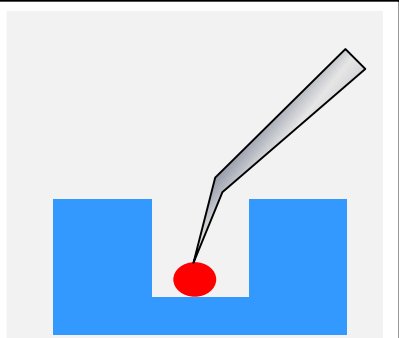

出来上がり

株式会社マイクロサポート

〒422-8036 静岡市駿河区敷地1-3-19  
TEL:054-269-5002 FAX:054-269-5003  
<http://www.microsupport.co.jp>

【販売代理店】

株式会社 テクノサイエンス  
〒264-0034 千葉県若葉区原町929-8  
TEL : 043-206-0155 FAX : 043-206-0188  
<https://www.techno-lab.co.jp/>

MSL-16-00001