


# 組立て液体セル Demountable FTIR Liquid Cell

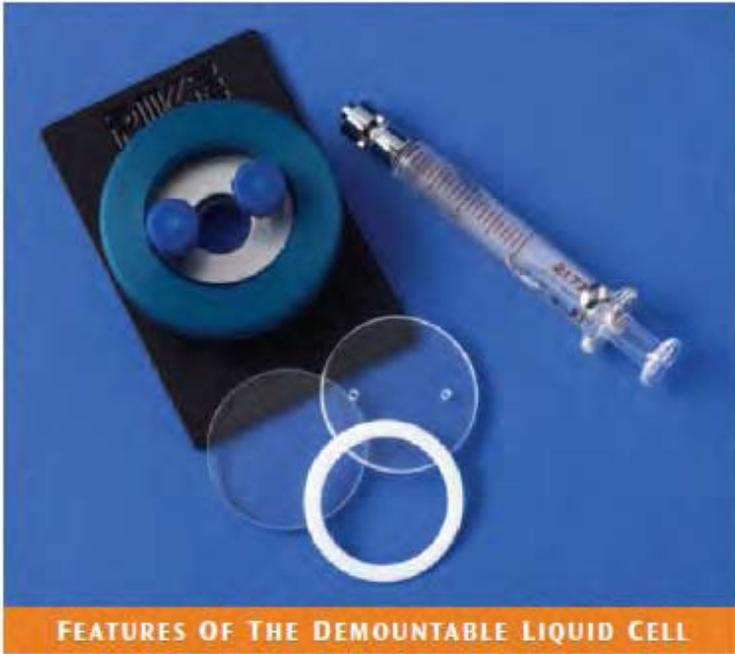

液体、ペースト、フィルム等の多様な分析に最適なセルです。

組立てセルでは、ペースト、フィルム、粘性液体、その他固体セルで使われているアマルガムシールと反応するようなサンプルを簡単に分析できます。この組立て液体セルではアマルガムのシールがテフロンスペーサーとガスケットに置き変わっています。またセルはリークがなく周辺で均一な圧力が保たれます。

デザインがシンプルで扱いが非常に簡単でありながら多様性に優れています。テフロンストッパーのついた2つの注入口よりセルへの充填、洗浄が簡単にすばやく行えます。光路長の変更はスペーサーを必要な厚さのものに置き換えるだけです。また窓板も取り外せるので交換や研磨も簡単にできます。

組立て液体セルキットには、1組の完全なセルとホルダーを組み立てる部品が全て(窓板は除く)含まれています。

## ORDERING INFORMATION

### 品番


162-1100

### 品名・内容

組立て液体セル用セルホルダー  
内容: 標準 2 x 3.スライドホルダー、テフロンガスケット  
テフロン O-ring, Luer-Lok フィッティング  
アルミニウムプレート、テフロンストッパー、  
スペーサーセット、エンドキャップ。

窓板は含まれておりません。  
穴あり、穴無し各 1 枚をご選択下さい。

窓板 (32 mm x 3 mm ディスク)

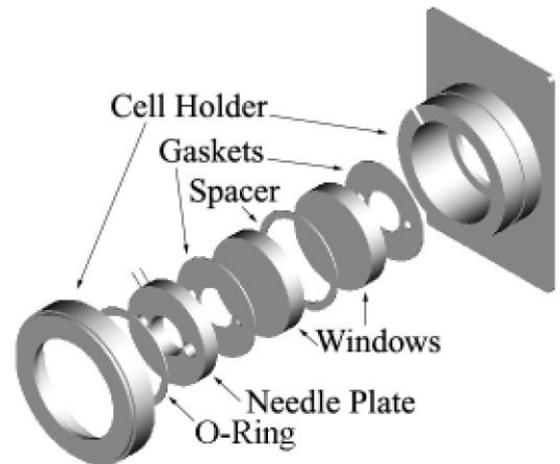

|     | BaF2     | CaF2     | Ge       | KBr      | KRS-5    | NaCl     | ZnSe     |
|-----|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 穴無し | 160-1147 | 160-1143 | 160-1137 | 160-1132 | 160-1126 | 160-1122 | 160-1113 |
| 穴有り | 160-1146 | 160-1142 | 160-1136 | 160-1131 | 160-1125 | 160-1121 | 160-1112 |

スペーサー (12個セット)

| スペーサー<br>厚さ | 0.015mm  | 0.025 mm | 0.05 mm  | 0.1 mm   | 0.2 mm   | 0.5 mm   | 1.0 mm   | Assortment |
|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|------------|
| 品番          | 162-1210 | 162-1220 | 162-1230 | 162-1240 | 162-1250 | 162-1260 | 162-1270 | 162-1290   |

Assortmentは各種の厚さのスペーサーが2枚ずつが含まれたセットです。