


## Micro Vice Holder      マイクロバイスホルダー

錠剤、大きなサンプル、フィルムの延伸といえばこれ！

国内・海外特許取得

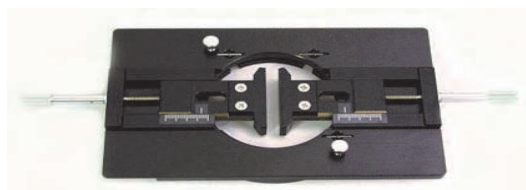


長年にわたり世界中の顕微鏡ユーザーに愛用されているポピュラーな便利グッズです。様々な形状の試料を容易に保持して固定します。また測定光に対し試料の測定面を調節できる機能も有効です。顕微装置のそばに必ず置いておきたいツールです。

Part No. STJ-0116-X




多種多様な顕微鏡測定用サンプルを簡単に保持測定できるホルダーです。

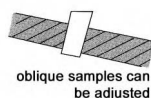


◆ 異形のサンプル保持、角度の補正

◆ サンプルの引っ張りに

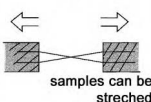

◆ ゴニオ機構による角度の補正

◆ 保持可能サンプルの最大幅は40mm

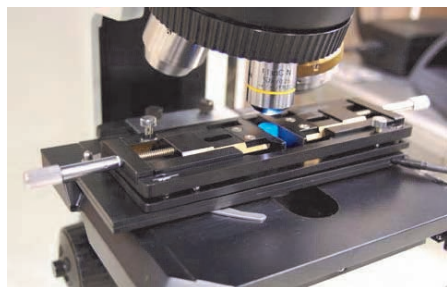

正確な高さ調整ができるマイクロメーター付マイクロバイス


Part No. STJ-0116-M

マイクロバイスに嬉しい！ 新機能



## MV-SliceIR      マイクロバイススライサー

特許出願中

マイクロバイスに斜めカット用ホルダーが開発されました。このホルダーを使用してカットするとカット面の幅が実際の幅の約4倍まで広がります。スペーサーの使用で薄い切片も作成できます。多層フィルム等の各層の測定時には大変有効なツールとなります。30°(2倍), 15°(4倍) が用意されています。

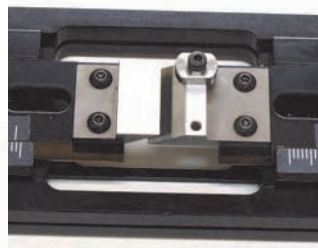

カット面が広がります

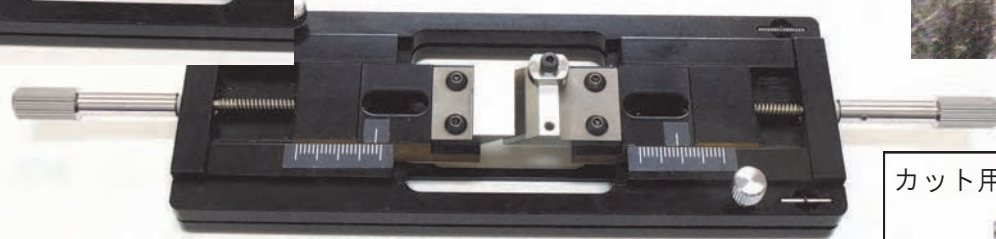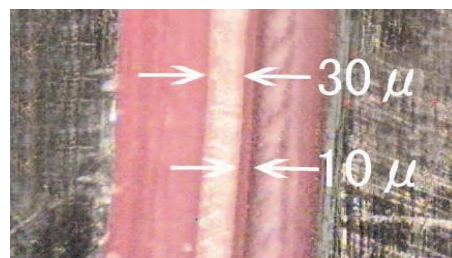

カット用テフロンナイフ100枚入





Part No. STJ-0116-N

Part No. STJ-0116-SL30 (30度), STJ-0116-SL15(15度)

## μContact Monitor      マイクロコンタクトモニター

圧力精度を求めたいときに！

赤外顕微鏡用ATR対物鏡使用時の試料との正確な圧力測定を行います。

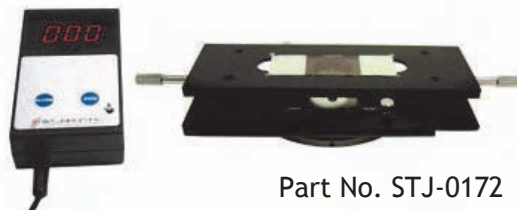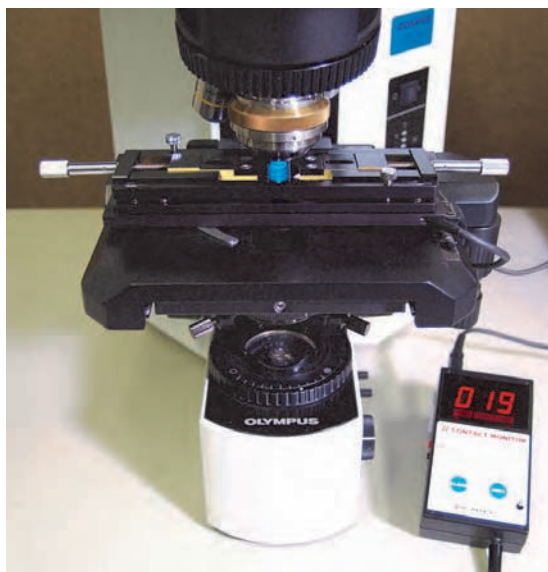

Part No. STJ-0172


指定の圧力でのアラーム設定ができます。  
複数試料を常に同一の圧力（密着度）で測定できますので  
定量測定にも有効なアクセサリです。

MicroViceとの組み合わせ使用により試料面の傾きの調整  
も可能です。

高価なダイヤモンドATR対物鏡等の過剰加圧による結晶  
の破損事故も防ぎます。


## Micro Vice -mini      マイクロバイスミニ

汎用顕微鏡のステージはこれ！ 1台であれこれ保持します

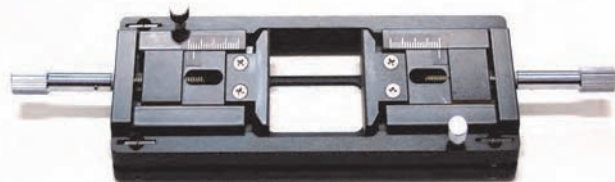

小さいステージでのご利用が可能なマイクロバイスミニタイプ。  
機能は変わらず、スライドガラス固定部に置いて使用可能。

Part No. STJ-0116-mini

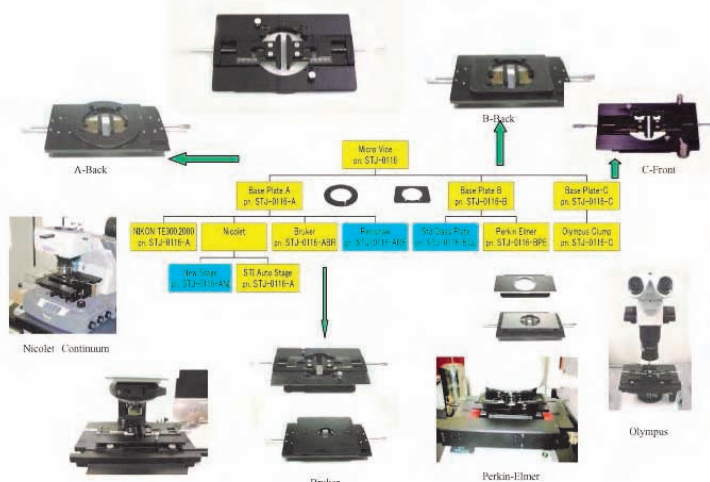

### 各種顕微鏡への取り付け

各種顕微鏡用固定アダプターを用意  
しておりますので、IR、Ramanだけ  
でなく可視、UV等多種顕微鏡ステー  
ジに取り付けることが可能です。

特別に製作も可能ですお問い合わせ  
ください。