

# IntegratIR 積分球アクセサリ(近赤外用)

近赤外用で高いS/N比を示す金コート積分球です。検出器、プリアンプなどのモジュールを装置に搭載しています。


10 mm のサンプリング窓が標準で装備されています。上向きの光学系によりサンプルの設置が容易で、品質の良い定量測定が可能です。多くの FT-NIR への取り付けが可能です。




- ・高い SN 比の 2 インチ金コート積分球を採用
- ・InGaAs 検出器及び検出器電子部品、光学系を全て内蔵
- ・製剤分析のための自動透過分析ステージオプション
- ・簡単な試料配置のための 10mm の水平サンプリングポート。
- ・優れた品質の定量的な NIR 分析ツール
- ・ヘテロ試料の平均化測定のためのオプションの回転ステージ
- ・スペクトル波数範囲: 12200~3850cm<sup>-1</sup>
- ・試料室設置型設計でほとんどの FTIR に取り付け可能




NIRIntegratIR 錠剤自動測定タイプ

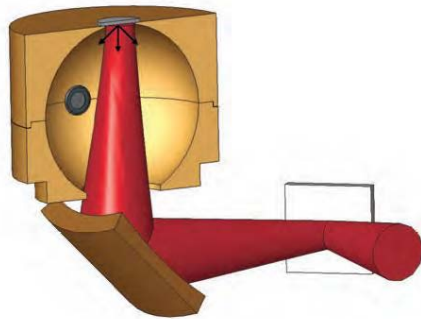


NIRIntegratIR 光学系

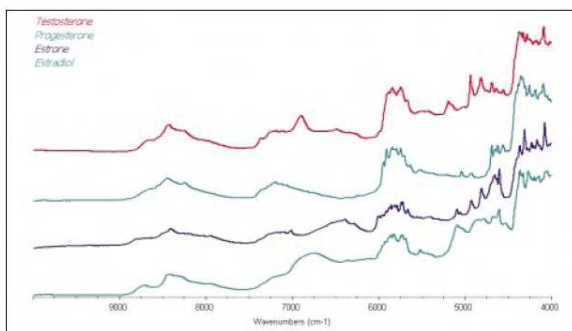

ステロイドの定量分析  
ガラスバイアルを使用して測定

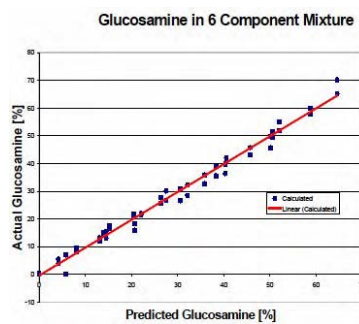

ステアリン酸マグシウム、ラクトース、セルロース、Emcompress™  
CaboSil™の多成分の定量測定

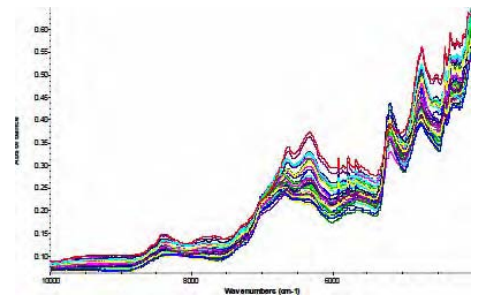

## ORDERING INFORMATION

品番	品名・内容
048-60XX	NIR IntegratIR 近赤外積分球アクセサリ 2"金拡散コート積分球, InGaAs 検出器, プリアンプ, 金拡散リファレンス, バイアルホルダー, ガラスバイアル
オプション	
048-2999	ガラスバイアル (Pack of 25), 19 x 65 mm
048-3000	金拡散リファレンス
048-3070	NIST トレーサブル標準試料
048-0050	ペトリディッシュ用ローテーティングステージ(不均一サンプル用) 92 x 20 mm ペトリディッシュ含む
048-0051	500 ml ビーカー用ローテーティングステージ