

PTFE *IR* - CARD

POLYETHYLENE *IR* - CARD

REAL CRYSTAL *IR* - CARD

IR カード



ディスプレイタイプIR透過セルの新しいラインナップです。従来のポリエチレン、テフロン製に加え、KBr、NaCl、KClの結晶を用いたリアルクリスタルタイプができました。リアルクリスタルタイプはバックグランド吸収がない上、特殊製法により耐水性があります。

カバースリップは、リアルクリスタルカードに試料を挟み込んで固定するためのカバーガラスの役目をします。カバースリップに直接塗布して透過測定を行うことも可能です。

粘性のある試料は直接塗布して測定します。

固形試料の場合は溶媒で溶解させ、カードのフィルム面、結晶面に塗布し、溶媒を蒸発させた後に測定します。

測定後はカードに試料情報等を記録し、保存することができます。

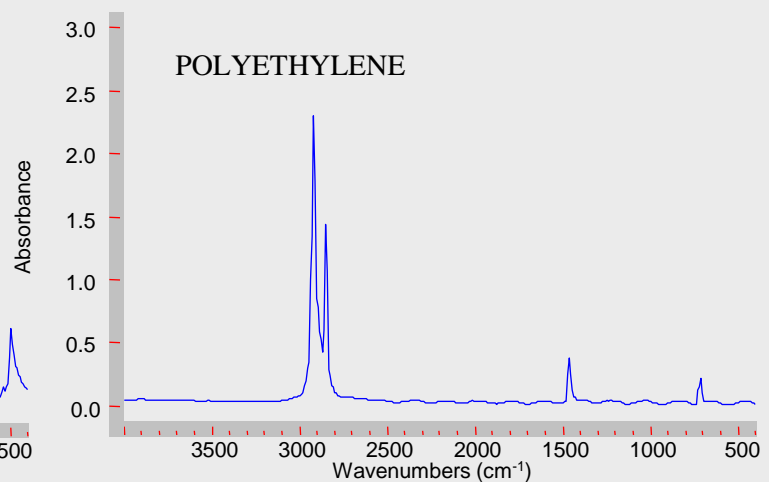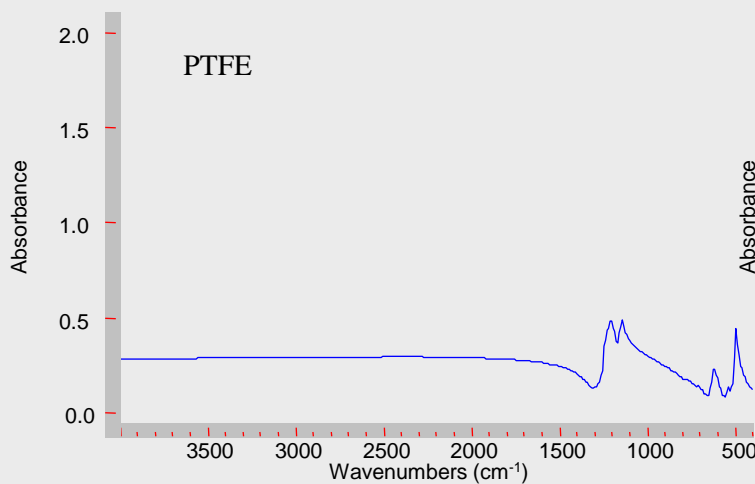







P/N	品名	数量	価格
-IR-7361-	PTFE IR カード φ19mm (10枚入り)	4	¥18,500
IR-7362	PTFE IR カード φ19mm (25枚入り)	1	¥24,500
IR-7363	PTFE IR カード φ19mm (50枚入り)	1	¥31,000
-IR-7364-	Polyethylene IR カード φ19mm (10枚入り)	4	¥20,000
IR-7365	Polyethylene IR カード φ19mm (25枚入り)	1	¥26,000
IR-7366	Polyethylene IR カード φ19mm (50枚入り)	1	¥32,500

2021/04/01

※ 上記価格に消費税は含まれておりません。

※ ご注文金額が ¥30,000.- 以下の場合、別途送料を申し受けます。

PTFE、POLYETHYLENE *IR*- CARD REAL CRYSTAL *IR*- CARD

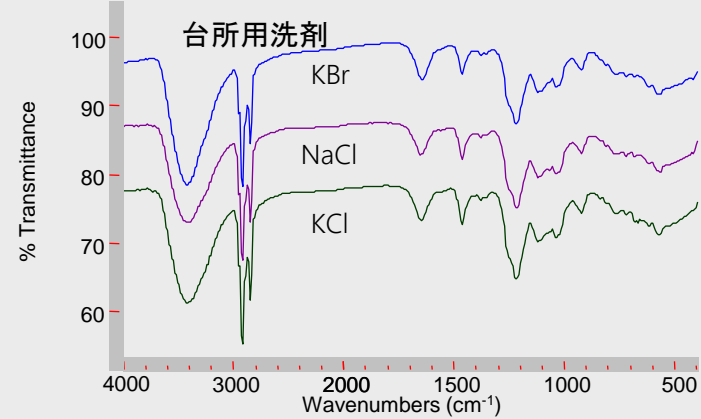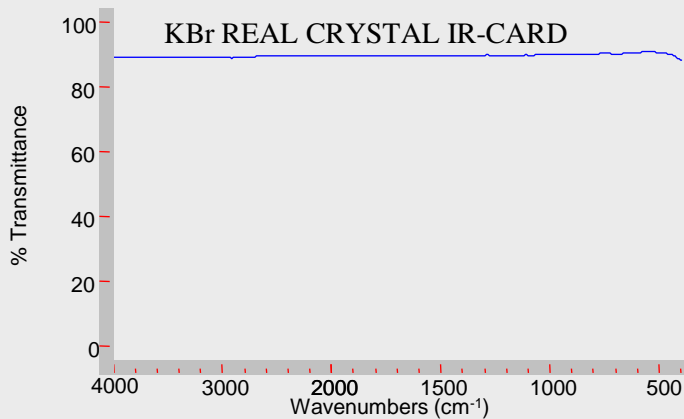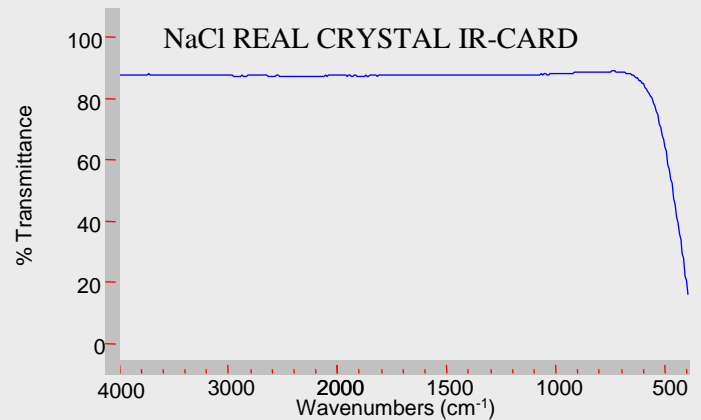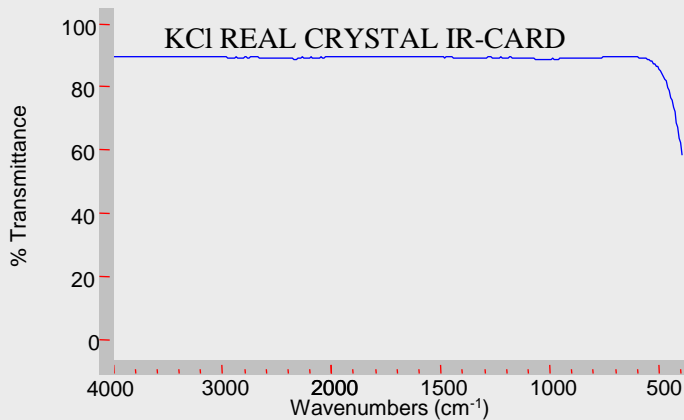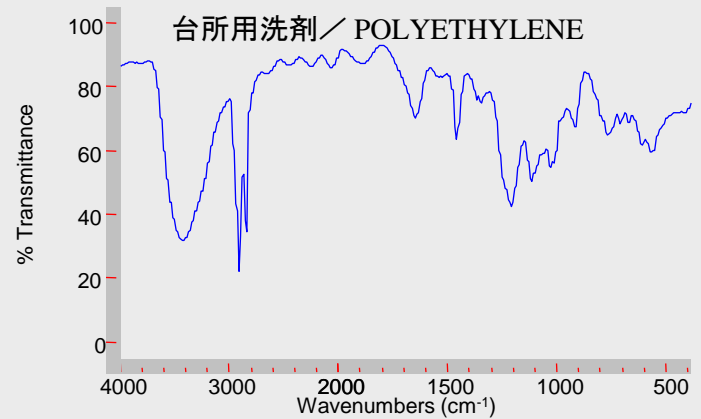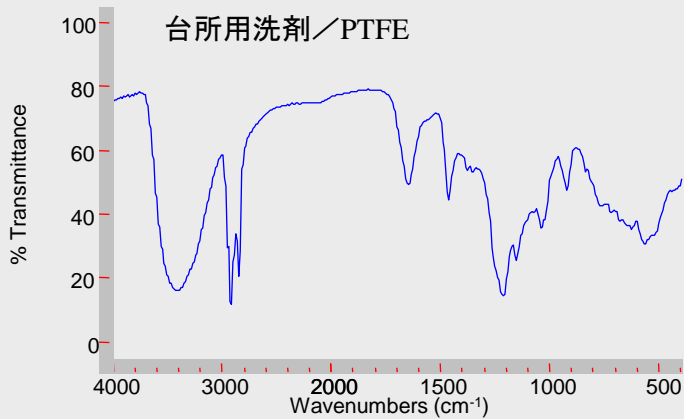

REAL CRYSTAL IR-CARDは特殊加工により、水系試料を塗布しても潮解することがありません。

P/N	品名	数量	価格
IR-7087	NaCl-REAL CRYSTAL IR-CARD (25枚入り, 19φ)	1	¥31,000
IR-7090	KBr-REAL CRYSTAL IR-CARD (25枚入り, 19φ)	1	¥37,000
IR-7091	KCl-REAL CRYSTAL IR-CARD (25枚入り, 19φ)	1	¥32,000
IR-7092	NaCl Cover Slips, (12 x 12 x t1mm, 25枚入り)	1	¥22,500
IR-7093	KBr Cover Slips, (12 x 12 x t1mm, 25枚入り)	1	¥26,800
IR-7094	KCl Cover Slips, (12 x 12 x t1mm, 25枚入り)	1	¥24,000

2021/04/01

※ 上記価格に消費税は含まれておりません。
※ ご注文金額が¥30,000.-以下の場合、別途送料を申し受けます。