

## サンプリング ツール

Sampling tools

## Sampling Accessories | 機能ツール

## マイクロツイーザーズ MTW-1

AP

QP

SS



QJ



- リモート操作でピンセットの開閉をスムーズに制御。マイクロ領域のサンプル把持、採取、ハンドリング、受渡しの一連作業を楽々行なえます。
- 手の振えや装置起因の振動が無く、狙ったターゲットを確実に把持できます。
- 弊社製マイクロマニピュレーター【アクシスプロ】に取付けて使用することにより、 $20\mu\text{m}$ ～の微小粒子や数 $\mu\text{m}$ 径の繊維、数 $\mu\text{m}$ 厚のフィルム等も、モニター上で視認した状態で採取・受渡しができます。

## アプリケーション

■ 粘着材の中より $30\mu\text{m}$ 異物を把持採取

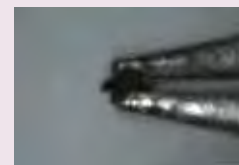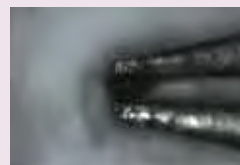

## 精密ピンセット TW-5050 / 2525 / 1515



- 先端形状が $50\mu\text{m}$ 以下の精密ピンセットラインナップです。
- マイクロサポートの精密ピンセットは、全て顕微鏡検査し合格した物のみを選別しておりますので、使い勝手は抜群です。
- $50\mu\text{m}$ サイズは手持ちでも使えます。
- $25\mu\text{m}$ 、 $15\mu\text{m}$ サイズは、マイクロツイーザーズの併用を強く推奨します。

TW-5050 先端チップサイズ $50\times 50\mu\text{m}$ TW-2525 先端チップサイズ $25\times 25\mu\text{m}$ TW-1515 先端チップサイズ $15\times 15\mu\text{m}$ 

## マイクロシザーズ MSC-2

AP

QP



SS

QJ



カシミア単繊維 $\phi 16\mu\text{m}$ の切断例

- リモート操作で鉋の開閉をスムーズに制御できます。
- 軟質繊維状の微小対象物の切断に威力を発揮します。
- 鉋部分は簡単に取り外してクリーニングや交換ができます。

■ 水平方向

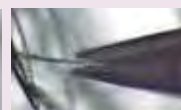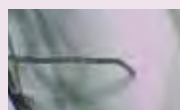

■ 垂直方向

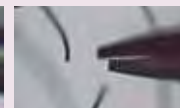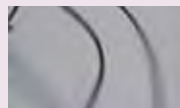

サンプリング機器

アクシスプロ

クイックプロ

クイックジョイ

XYZファイン

サンプリングステーション

サンプリングステーション  
システムダイヤグラムマイクロサンプリング  
マシン 対比表マイクロサンプリング  
マシン 仕様表

サンプリングツール

マイクロツール  
金属プローブマイクロツール  
ナイフツールマイクロツール  
ガラスツールマイクロツール  
特殊ツールマイクロツール  
仕様表

機能ツール

保持・固定ツール

観察・記録ツール

顕微鏡・周辺ツール

アプリケーション別  
セットアップ