


New!

スペシメンウェイト SWシリーズ

リング型固定治具

シート状試料をウェイトで簡単固定

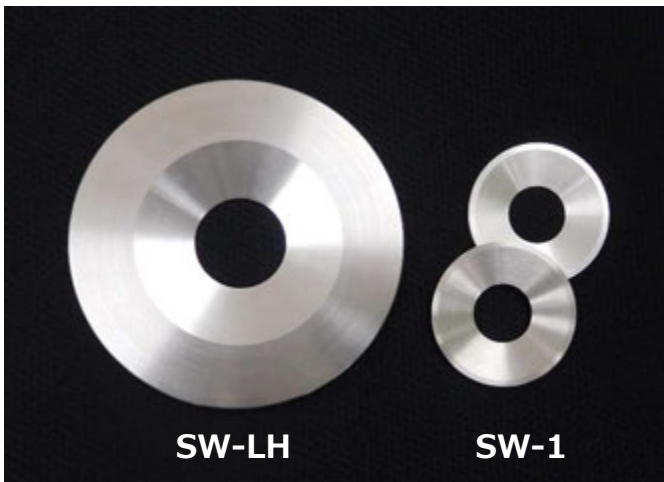

◆不織布・腰の無いフィルムなどのシート状試料からのサンプリングに大変貴重なスペシメンウェイトです

◆両面テープ・メンディングテープなどの粘着テープで固定が難しい試料に最適です

◆100 μ m程度の薄いフィルムにはSW-1、腰の強い試料の場合は、重量のあるSW-LHを推奨します

◆マニピュレーターを用いた微小異物サンプリングから、実体顕微鏡でのツール手持ち作業まで、広範囲の用途に対応します

◆スペシメンウェイトLH

SW-LH 標準価格：¥16,000.-（税別）1枚

◆スペシメンウェイト

SW-1 標準価格：¥18,000.-（税別）2枚組

SW-LH



SW-1の10倍の重量

《主な仕様》1枚


- ・直径：110mm
- ・内径：30mm
- ・厚み：5mm
- ・重量：300g

《使用方法・用途》

- ・金属メッシュ布、厚い不織布や繊維製品などの固定
- ・腰の強いフィルムなどの固定
- ・粘着固定したくない試料の安定用
- ・上記を固定後、写真撮影や異物サンプリング実施



アクシスプロでの使用例（厚い不織布の固定）

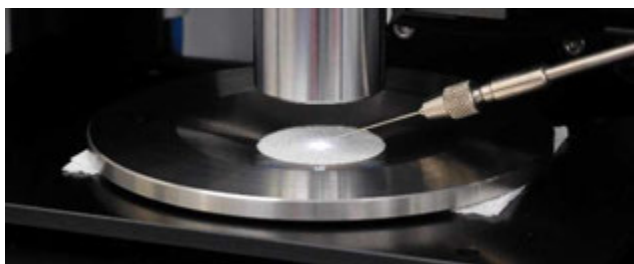

SW-1




スタンダードモデル

《主な仕様》1枚あたり

- ・直径：49mm
- ・内径：20mm
- ・厚み：3mm
- ・重量：30g

《使用方法・用途》

- ・フィルム、薄い不織布や繊維製品などの固定
- ・固定面積が小さい場合に最適
- ・分析対象部位をステージに接触させたくない場合
- ・上記を固定後、写真撮影や異物サンプリング実施

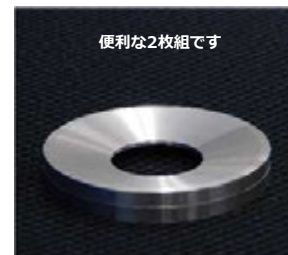

アクシスプロでの使用例（薄い不織布の固定）



株式会社マイクロサポート

〒422-8036 静岡県駿河区敷地1-3-19
TEL:054-269-5002 FAX:054-269-5003
<http://www.microsupport.co.jp>

【販売代理店】 (株)テクノサイエンス

〒264-0034 千葉県若葉区原町929-8
TEL:043-206-0155 FAX:043-206-0188
<https://www.techno-lab.co.jp/>

[MSL-17-00002]

V1-1